

FastCut



37%15'

80%20'


CpG

-20°C

FastCut
ok

FastCut® Sac I SAR

■ FC023M	FastCut Sac I	50 µl	220
■ FC023	FastCut Sac I	100 µl	400
■ FC024	FastCut Sac I	500 µl	1600

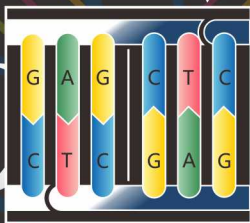

Attention:

A 100% activity in FastCut buffer.

B Blocked by CpG.

mail: info@SibEnzyme.com.cn
<http://www.SibEnzyme.com.cn>

酶切反应体系设置

FastCut Buffer, 37 °C

快切模式：

water	20-x µl	20-x µl	30-x µl
10 × FastCut Buffer	2 µl	2 µl	3 µl
DNA	1 µg	2 µg	3 µg
FastCut内切酶	1 µl	2 µl	3 µl
合计	20 µl	20 µl	30 µl

37°C, 酶切 15-30分钟。
 也可按 50 µl 体系进行酶切。

注意：

1. 双酶切或者多酶切时, 所有酶体系总和不得超过总反应体系的1/10
2. 快速酶切推荐使用20 µl体系, 过夜酶切推荐使用50 µl体系
3. 双酶切, 温度不同时, 先低温酶切, 再高温酶切
4. 本快切反应适合于经过纯化的PCR产物
5. 若PCR产物直接酶切时, 酶切体系一般设置为30 µl, 10×FastCut 缓冲液可适当减少至1-2 µl, 最好先预实验。

For Research Use Only
 2025-05-05-V3.1